



# Abimade

Compromisso com a qualidade, foco na solução.



## Conheça nossos produtos

***Transformando desafios em soluções:***

Seu fornecedor de confiança em itens descartáveis, ortopédicos e equipamentos para tratamento da dor.

**PORTIFÓLIO**



[www.abimade.com.br](http://www.abimade.com.br)

# Quem somos

Olá! Somos a Abimade...

## conhecendo mais sobre

Fundada em 2010, nossa missão é desenvolver produtos que atendam às diversas necessidades na área de ortopedia, preenchendo lacunas no mercado. Somos uma empresa brasileira com tecnologia de ponta na fabricação de implantes ortopédicos de alta qualidade, produzidos nacionalmente com padrões internacionais de excelência técnica.

Com sede em São Paulo-Brasil, a Abimade atende profissionais da área da saúde que buscam soluções em produtos médicos, tais como: Cânula/Kit para Bloqueio (Nervos Periféricos e Buco), Cânula para RF, Kit para Discografia (Analógica), Guia de Biópsia Endocavitária (Prostáticas, Endovaginais e Punção Folicular), Haste Intramedular Flexível em Titânio (Diamantada e Teen), Cânula para aplicação de fármaco para endoscopia (300mm) e Fixador Intramedular Ossêo esteril em Titanêo.



# Nossa Missão

É fabricar e comercializar produtos médicos de alta qualidade, em parceria com nossos fornecedores e nossos colaboradores, buscando o crescimento de todos e visando atender aos requisitos de qualidade e desempenho de nossos clientes.




**Abimade**



[www.abimade.com.br](http://www.abimade.com.br)

# Fixador Intramedular Ósseo Estéril em titânio Abimade

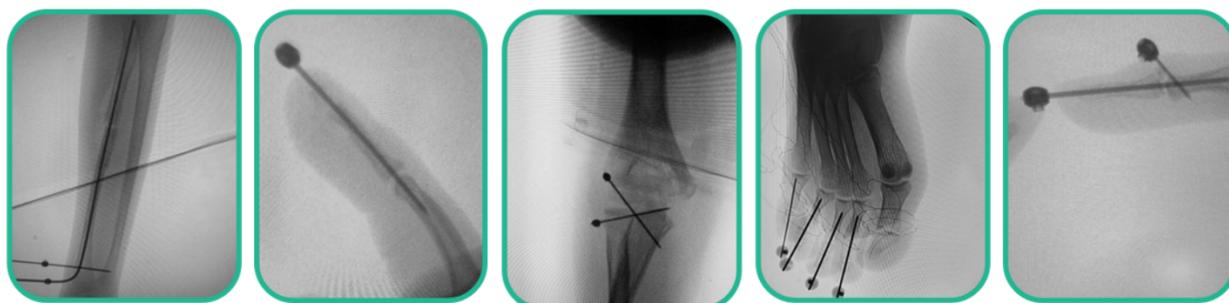

## INFORMAÇÕES



O Fixador Intramedular Ósseo da Abimade é apresentado como opção mais simples para fraturas diafisárias e metafisárias em substituição às placas.

O processo operatório é minimamente invasivo. Tem por princípio a estabilização de fraturas de ossos longos, ou ossos das mãos e dos pés, e Clavícula, por via cirúrgica, introduzindo-se o Fixador Intramedular Ósseo na medula óssea, de modo a reduzir e orientar convenientemente a consolidação da fratura.

### São indicadas para os seguintes tipos de fraturas:

- Fraturas transversais
- Fraturas transversais ou oblíquas pequenas com extremidades quebradas
- Fraturas oblíquas pequenas com possibilidade de suporte cortical
- Fraturas espirais
- Fraturas bifocais e multi fragmentares
- Fraturas patológicas com cistos ósseos juvenis
- Fraturas metafisárias e dialisárias de falanges dos pés ou mãos

### Disponíveis nos seguintes diâmetros:

1.0 x 300mm / 1.2 x 300mm / 1.5 x 300mm / 2.0 x 300mm e 2.5 x 300mm

### O Kit é composto por:

- 1 - Haste diamantada
- 1 - Oliva Inox 4.0mm
- 1 - Uma Chave Instrumental Hexalobular
- 1 - Um tubo de proteção para Haste


Registro: 80525320024

\*Instruções de uso em nosso site\*



[www.abimade.com.br](http://www.abimade.com.br)

# Hastes Flexível Diamantada Abimade

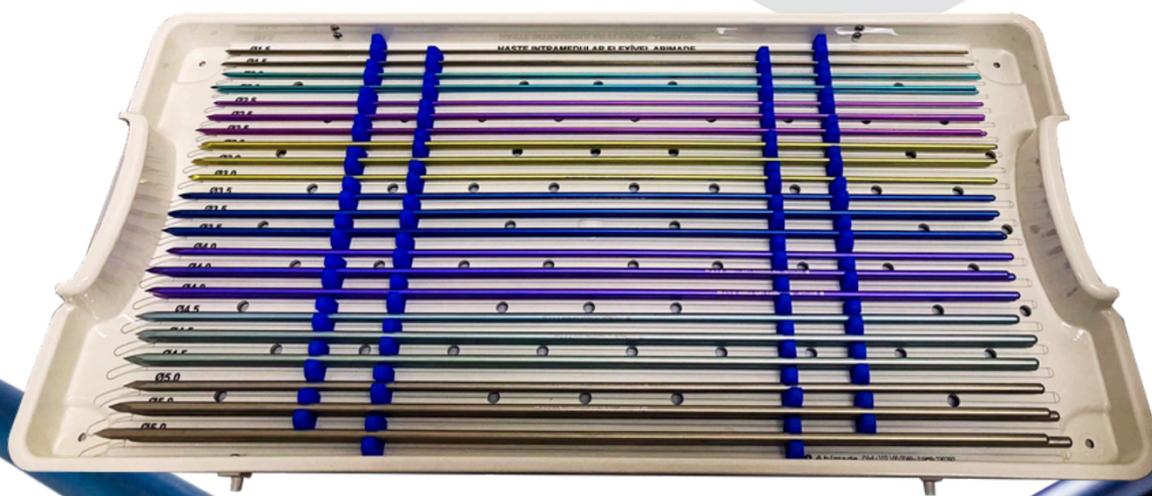

## INFORMAÇÕES



Desenvolvido primordialmente para a recuperação de fraturas diafisárias de qualquer aspecto em fêmures infantis, e para isso a utilização de liga de titânio ASTM F136 se mostra ideal, dado seu módulo de elasticidade parecido ao do osso, porém é comum a prática de inúmeras variantes para os diversos diagnósticos, como uso de uma ou três hastes, uso em outros ossos longos, como úmero, ulna, rádio e fíbula, uso em adultos, e mesmo uso em conjunto com recursos auxiliares não-invasivos, como talas ou gesso. Estudo feito em uma amostra de 13 crianças com fraturas no úmero tratadas com hastes flexíveis de titânio, acompanhadas ao longo de 29 meses, mostra que é uma técnica extremamente eficaz. E, assim, restam admissíveis outras aplicações que em fratura do fêmur em crianças, desde que apropriadamente avaliadas pelo médico.

Indicações típicas são:

Tipos de fraturas:

- Fraturas Transversais
- Fraturas Transversais ou Oblíquas pequenas com extremidade quebradas
- Fraturas Oblíquas pequenas com possibilidade de suporte cortical
- Fraturas Espirais
- Fraturas Bifocais e Multifragmentares
- Fraturas Patológicas com cistos ósseos juvenis

Locais:

- Fêmur: diafisária
- Fêmur distal: metafisária
- Fêmur: subtrocantária
- Perna inferior: diafisária
- Perna inferior: metafisária distal
- Úmero: diafisária e subcapital
- Úmero: supracondilar
- Rádio e Ulna: eixo
- Rádio: pescoço

**Haste Flexível Diamantada:**

Diametro - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 3,5 - 4,0 - 4,5 e 5,0 mm  
Comprimento - 100 - 150 - 300 e 450 mm

**Mini Haste Flexível Diamantada:**

Diametro - 1,0 - 1,2 e 1,4 mm  
comprimento - 100 - 150 e 300 mm

Fabricado com liga de Titânio conforme ASTM F136

Registro: 80525320011


**\*Instruções de uso em nosso site\***



[www.abimade.com.br](http://www.abimade.com.br)

# Hastes Intramedular Flexível Teem

## Abimade

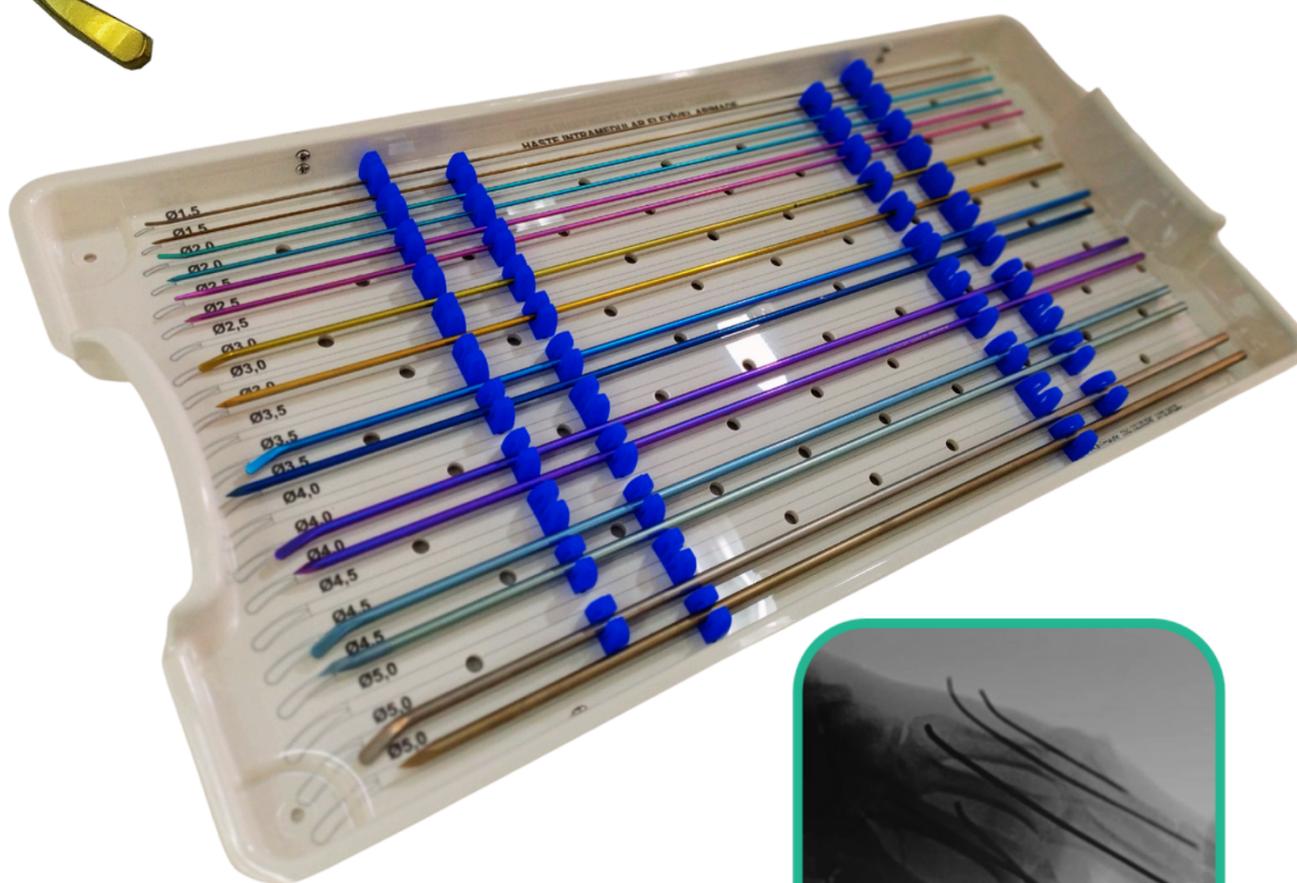

### INFORMAÇÕES



As hastes são apresentadas como opção mais simples para fraturas diafisárias e metafisárias em substituição das placas. O processo operatório é mini invasivo e os implantes facilmente adaptáveis à situação da cirurgia. A flexibilidade do titânio permite o “efeito de mola” entre os implantes, garantindo estabilidade, diminuição do tempo de cirurgia e reabilitação do paciente.

São indicadas para os seguintes tipos de fraturas:

- Fraturas Transversais.
- Fraturas Transversais ou Oblíquas pequenas com extremidade quebradas.
- Fraturas Oblíquas pequenas com possibilidade de suporte cortical.
- Fraturas Espirais.
- Fraturas Bifocais e Multi-fragmentares.
- Fraturas Patológicas com cistos ósseos juvenis.

São indicadas para os seguintes locais:

- Fêmur: diafisária.
- Fêmur distal: metafisária.
- Fêmur: subtrocantariana.
- Perna inferior: diafisária.
- Perna inferior: metafisária distal.
- Úmero: diafisária e subcapital.
- Úmero: supracondilar.
- Rádio e Ulna: eixo.
- Rádio: pescoço.

Código	Cor	Descrição / Diâmetro / Comprimento
010-00	Amarela	Haste Intramedular Flexível Teem Ø 1.0 x 100 mm
012-00	Azul	Haste Intramedular Flexível Teem Ø 1.2 x 100 mm
014-00	Vermelha	Haste Intramedular Flexível Teem Ø 1.4 x 100 mm
015-00	Dourada	Haste Intramedular Flexível Teem Ø 1.5 x 450 mm
020-00	Verde	Haste Intramedular Flexível Teem Ø 2.0 x 450 mm
025-00	Vermelha	Haste Intramedular Flexível Teem Ø 2.5 x 450 mm
030-00	Amarela	Haste Intramedular Flexível Teem Ø 3.0 x 450 mm
035-00	Azul	Haste Intramedular Flexível Teem Ø 3.5 x 450 mm
040-00	Violeta	Haste Intramedular Flexível Teem Ø 4.0 x 450 mm
045-00	Cinza	Haste Intramedular Flexível Teem Ø 4.5 x 450 mm
050-00	Cinza Escuro	Haste Intramedular Flexível Teem Ø 5.0 x 450 mm


Registro: 80525320003

\*Instruções de uso em nosso site\*



[www.abimade.com.br](http://www.abimade.com.br)

# Instrumentais para mini hastes Abimade

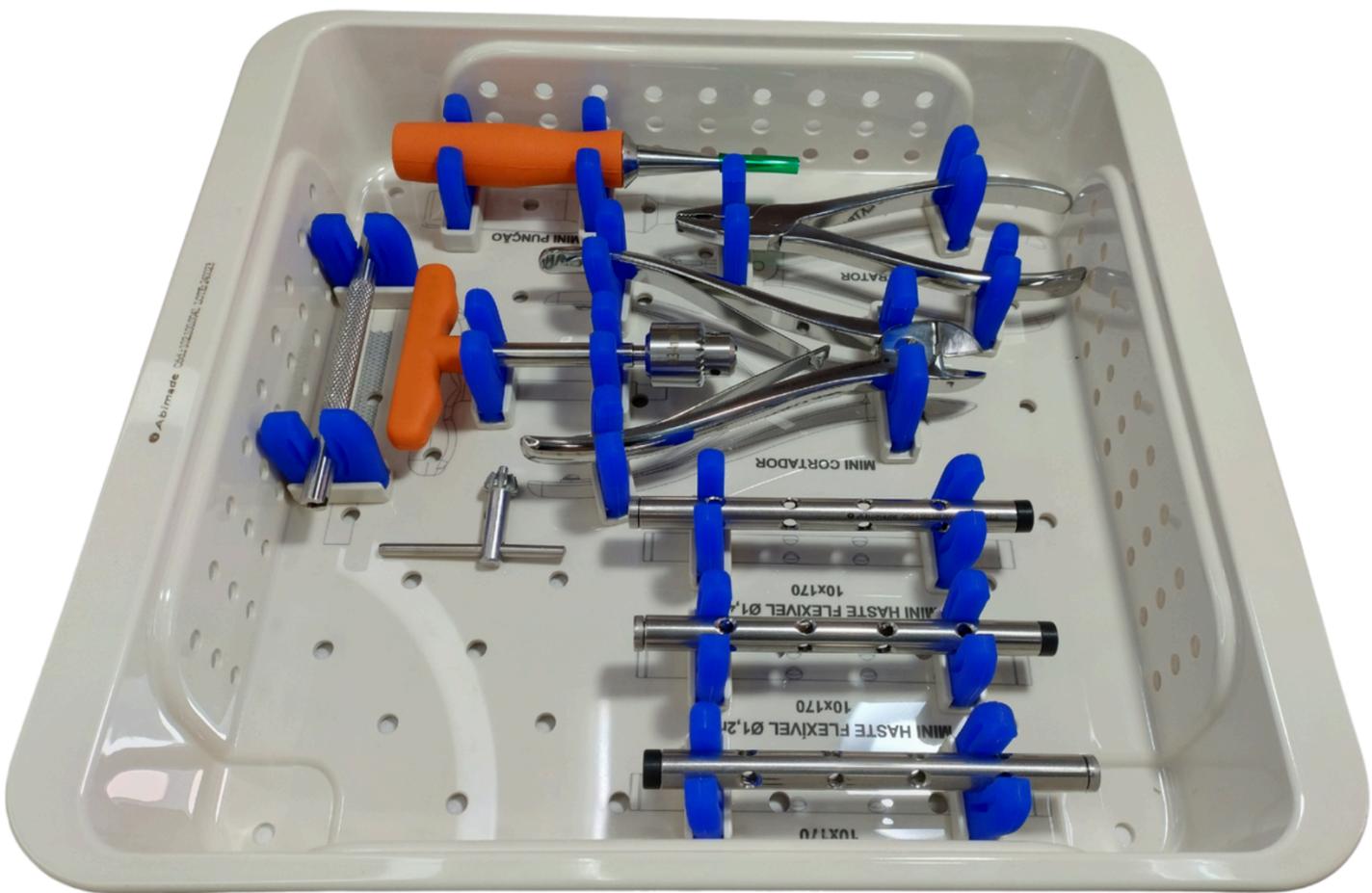

Instrumentais para Mini Haste Intramedular Flexível Teem Abimade.  
CAIXA PEQUENA



## INFORMAÇÕES



O Kit Instrumental para Haste Intramedular Flexível Teem Abimade está acoplado em caixa e bandejas, de maneira a facilitar o uso em cirurgias pelo motivo da quantidade de peças. Os instrumentais, objetos deste registro, foram exclusivamente desenhados para serem utilizados com as Hastes Intramedulares (Haste Flexível e Mini Haste Flexível) registradas à parte e fabricadas pela empresa Abimade. São instrumentais que auxiliam a implantação destas hastes intramedulares, utilizadas para alinhamento de ossos curtos e longos, estabilizações e fixação de fraturas, provocadas por traumatismo de doença, fixação de ossos preparados cirurgicamente por osteotomia para correção de deformidades e artrodese.  
Instrumentais para Mini Haste Intramedular Flexível Teem Abimade.

Registro: 80525320002  
\*Instruções de uso em nosso site\*

CÓDIGO	DESCRIÇÃO - CX PEQUENA
102.101.0100	Mini Punção
102.101.0003	Mini Cabo em T
102.101.0004	Mini Container Mini Haste Flexível 1.0, 1.2 e 1.4
102.100.0032	Mini Extrator de Haste Intramedular
102.100.0037	Mini Cortador
102.101.0015	Impactor para Mini Haste
102.100.0041	Caixa Esterilização Instrumental Mini Haste Flexível



[www.abimade.com.br](http://www.abimade.com.br)

# Instrumentais Hastes Intramedular Flexível Teem e diamantada Abimade



## Instrumentais para Haste Intramedular Flexível Teem Abimade. CAIXA GRANDE

### INFORMAÇÕES



O Kit Instrumental para Haste Intramedular Flexível Teem Abimade está acoplado em caixa e bandejas, de maneira a facilitar o uso em cirurgias pelo motivo da quantidade de peças. Os instrumentais, objetos deste registro, foram exclusivamente desenhados para serem utilizados com as Hastes Intramedulares (Haste Flexível e Mini Haste Flexível) registradas à parte e fabricadas pela empresa Abimade. São instrumentais que auxiliam a implantação destas hastes intramedulares, utilizadas para alinhamento de ossos curtos e longos, estabilizações e fixação de fraturas, provocadas por traumatismo de doença, fixação de ossos preparados cirurgicamente por osteotomia para correção de deformidades e artrodese. Instrumentais para Mini Haste Intramedular Flexível Teem Abimade.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO – CX GRANDE
102.100.0047	Cortador Dinâmico
102.100.0031	Cortador para Haste Flexível
102.100.0034	Cabo em T com Mandril
102.100.0030	Martelo Canulado para Haste Flexível
102.100.0044	Impactor para Haste 1.5 a 3.0 MM
102.100.0045	Impactor para Haste 3.5 a 5.0 MM
102.100.0046	Extrator de Haste Intramedular
102.100.0035	Extrator de Haste Flexível com Cremalheira
102.100.0043	Punção Haste Flexível
102.100.0040	Caixa Esterilização Instrumentais Haste Flexível

Registro: 80525320002  
\*Instruções de uso em nosso site\*



[www.abimade.com.br](http://www.abimade.com.br)

# Kit Biocompact Abimade

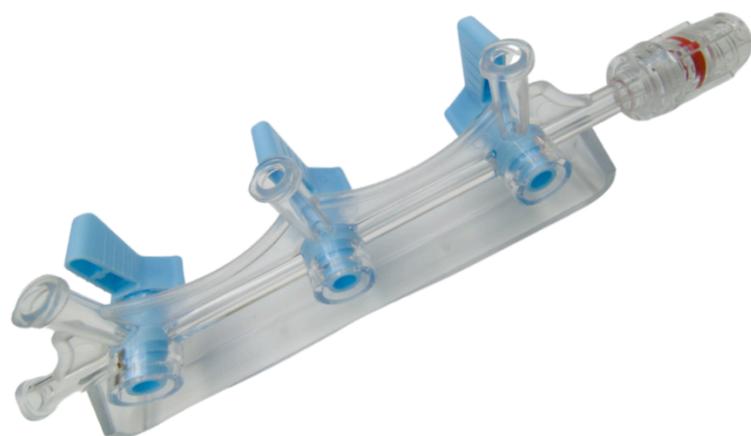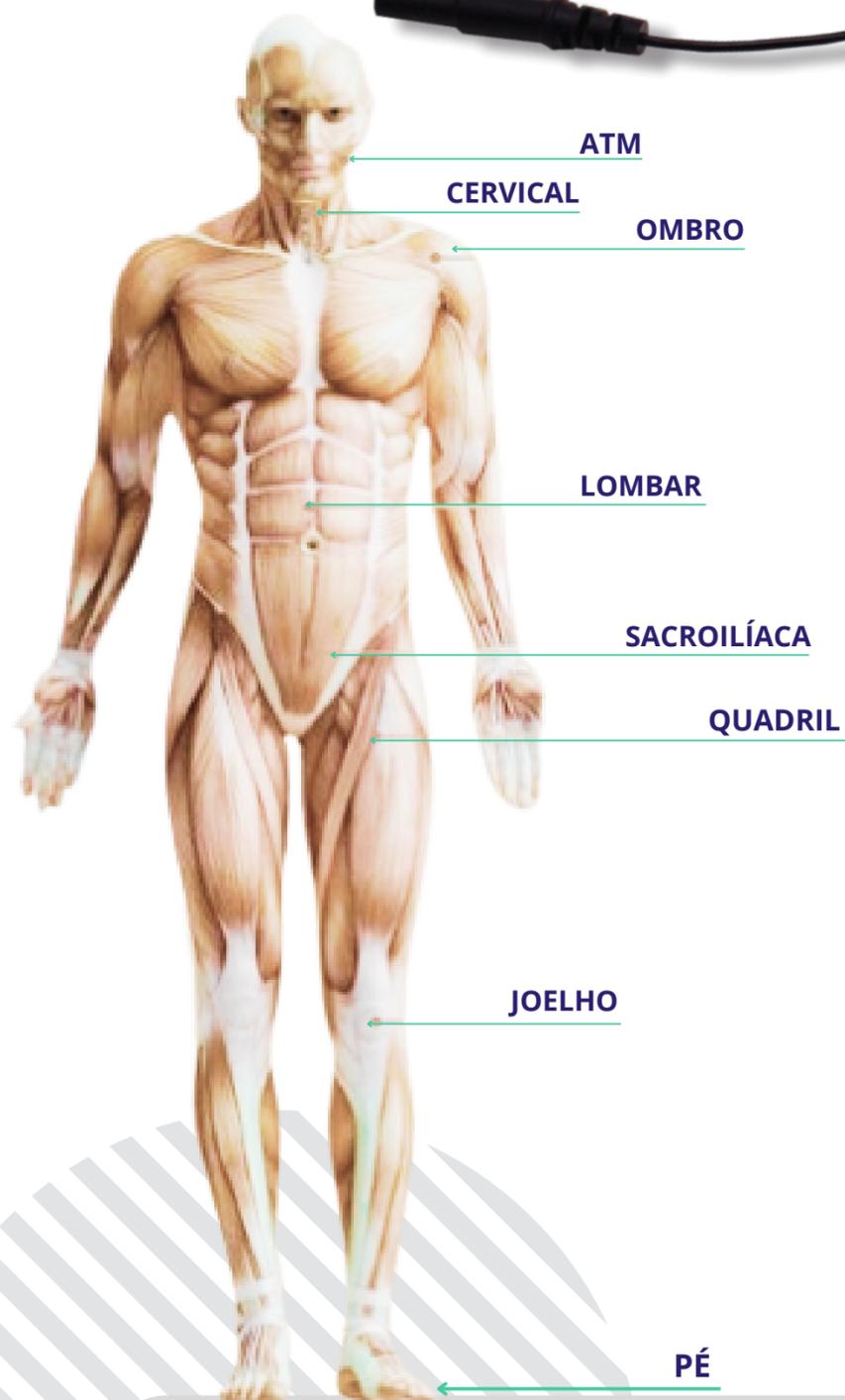

## INFORMAÇÕES



A cânula do **KIT BIOCOPACT ABIMADE**, com ponta chanfrada de 30°, foi projetada, assim como cânulas tradicionais para essa finalidade, para o Plexo Braquial e nervos periféricos. Proporciona anestesia e analgesia locais em procedimentos cirúrgicos envolvendo extremidades superiores e inferiores, mama e abdômen.

É guiada através de monitoramento por ultrassom (procedimento conhecido por "Ultrasound Guided Regional Anestesia", ou "UGRA"), além de ser provida de condutor para estimulação elétrica.

O diferencial desse produto em relação às cânulas tradicionais é que, além da estimulação elétrica para verificação do posicionamento, sua alta ecogênicidade facilita sobremaneira a sua visibilidade no ultrassom, aumentando a segurança do procedimento, principalmente em equipamentos de ultrassom de tecnologia não atualizada ou com menos recursos de processamento de imagem.

A Cânula é útil para técnicas de bloqueio nervoso em procedimentos de dor aguda e crônica.

### **KIT BIOCOPACT SIMPLE ABIMADE**

é composto por: 2 ou 4 Cânulas iguais (cada Cânula sendo provida de:

- 1 Proteção da Cânula,
- 1 Tubo Injetor com conexão Luer Lock,
- 1 Tampa do Luer Lock
- 1 Cabo de Conexão),
- 1 Manifold,
- 1 Aplicador,
- 1 Agulha de Sucção do medicamento,

O Kit pode ser composto por 2 ou 4 cânulas quando a intervenção da dor necessita um procedimento maior e conseqüentemente mais agulhas, exemplo lombar ou Sacrílaco

Disponíveis nos seguintes tamanhos:  
Diâmetros - 20G / 21G / 22G  
Comprimento - 50 / 100 / 150mm

Registro: 80525329007

**\*Instruções de uso em nosso site\***



[www.abimade.com.br](http://www.abimade.com.br)

# Kit Cãnula Abiblock Abimade



## INFORMAÇÕES



As Cãnulas de Bloqueio da Abimade têm por finalidade o bloqueio do plexo e dos nervos periféricos através de estimulação elétrica e/ou ultrassom. Respectivamente para uma detecção precisa de áreas definidas dos nervos.

O bloqueio nervoso é utilizado em procedimentos cirúrgicos, assim como para terapia da dor nas extremidades superiores e inferiores através de várias técnicas de bloqueio.

Todas as nossas cãnulas tem marcação de profundidade para orientação de penetração que é para auxiliar o procedimento.

Cãnula convencional tem soro-visibilidade na extremidade (10mm).


Registro 80525320010

\*Instruções de uso em nosso site\*



[www.abimade.com.br](http://www.abimade.com.br)

# Kit Cãnula Abiblock Echo-Pro Abimade

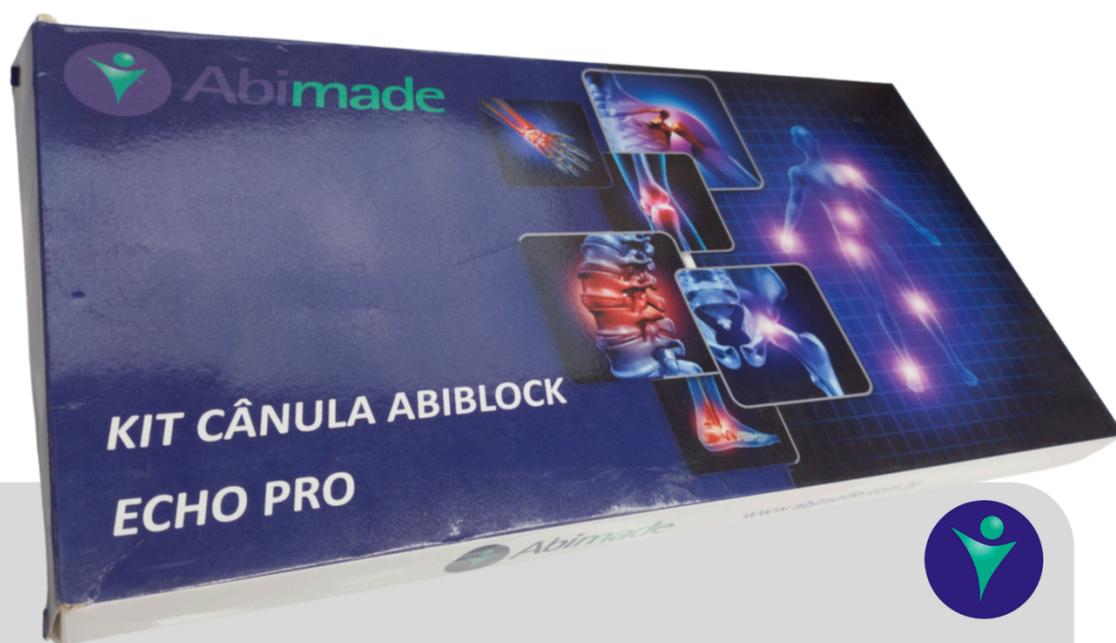

## INFORMAÇÕES

As novas **Cãnulas de Bloqueio Echo Pro Ecogênicas** da Abimade têm por finalidade o bloqueio do plexo e dos nervos periféricos através de estimulação elétrica e/ou ultrassom. Respectivamente para uma detecção precisa de áreas definidas dos nervos. O bloqueio nervoso é utilizado em procedimentos cirúrgicos, assim como para terapia da dor nas extremidades superiores e inferiores através de várias técnicas de bloqueio. A Cãnula Bloqueada Abimade é importada, ecogênica, chanfrada e com isolamento elétrico.

Todas as nossas cãnulas tem marcação de profundidade para orientação de penetração que é para auxiliar o procedimento.

Echo-pro totalmente soro-visível compatível com qualquer equipamento de imagem permite-se enxergar o corpo inteiro independente da profundidade ou se está atrás de uma massa óssea.

### Tamanhos ( Echo-PRO):

20G [50, 80, 100 e 150 mm]  
21G [50, 80, 100 e 150 mm]  
22G [50, 80, 100 e 150 mm]

Registro: 80525329001

\*Instruções de uso em nosso site\*



[www.abimade.com.br](http://www.abimade.com.br)

# Kit Acesso para Bloqueio Abimade



## INFORMAÇÕES

A cânula do Kit Acesso para Bloqueio Abimade, com ponta chanfrada de 30°, foi projetada, assim como cânulas tradicionais para essa finalidade, para o Plexo Braquial e nervos periféricos.

Proporciona anestesia e analgesia locais em procedimentos cirúrgicos envolvendo extremidades superiores e inferiores, mama e abdômen.

É guiada através de monitoramento por ultrassom (procedimento conhecido por "Ultrasound Guided Regional Anesthesia", ou "UGRA"), além de ser provida de condutor para estimulação elétrica.

Kit Acesso para Bloqueio Abimade é composto por: 2 ou 4 Cânulas iguais, 1 Tubo Injetor com conexão Luer Lock, 1 Manifold, 1 Agulha de Sucção do medicamento, e 1 manta radiopaca.

### Tamanhos (Convencionais e Echo-PRO):

20G [50, 80, 100 e 150 mm]  
21G [50, 80, 100 e 150 mm]  
22G [50, 80, 100 e 150 mm]

Registro: 80525329003

\*Instruções de uso em nosso site\*



[www.abimade.com.br](http://www.abimade.com.br)

# Cânula Guia RF Descartável Abimade



## INFORMAÇÕES

A Cânula-Guia RF Descartável - ABIMADE tem a função de GUIAR o posicionamento adequado do eletrodo de radiofrequência, no paciente. Este eletrodo de radiofrequência, assim como o gerador de radiofrequência, são vendidos separadamente, e não fazem parte deste Cadastro de Produto junto à Anvisa.

O eletrodo de radiofrequência, guiado pela CÂNULA - GUIA RF DESCARTÁVEL - ABIMADE, promove a lesão térmica por radiofrequência em tecido nervoso, eliminando dores crônicas e agudas dos pacientes em diferentes procedimentos. (O ELETRODO DE RADIOFREQUÊNCIA E O GERADOR DE RADIOFREQUÊNCIA, NÃO SÃO OBJETO DESTE CADASTRO JUNTO À ANVISA).

### DISPONÍVEIS NAS DIMENSÕES:

18G x 100x5  
20G x 150x5  
22G x 150x10  
22G x 100x10

**Compatíveis com:**  
**ELETRODOS (PROBE) Baylis, Halyard, Cosman,  
Neurotherm, Stryker w APPRO KOREA**


Registro: 80525320012  
**\*Instruções de uso em nosso site\***



[www.abimade.com.br](http://www.abimade.com.br)



# Kit de Discografia Abimade

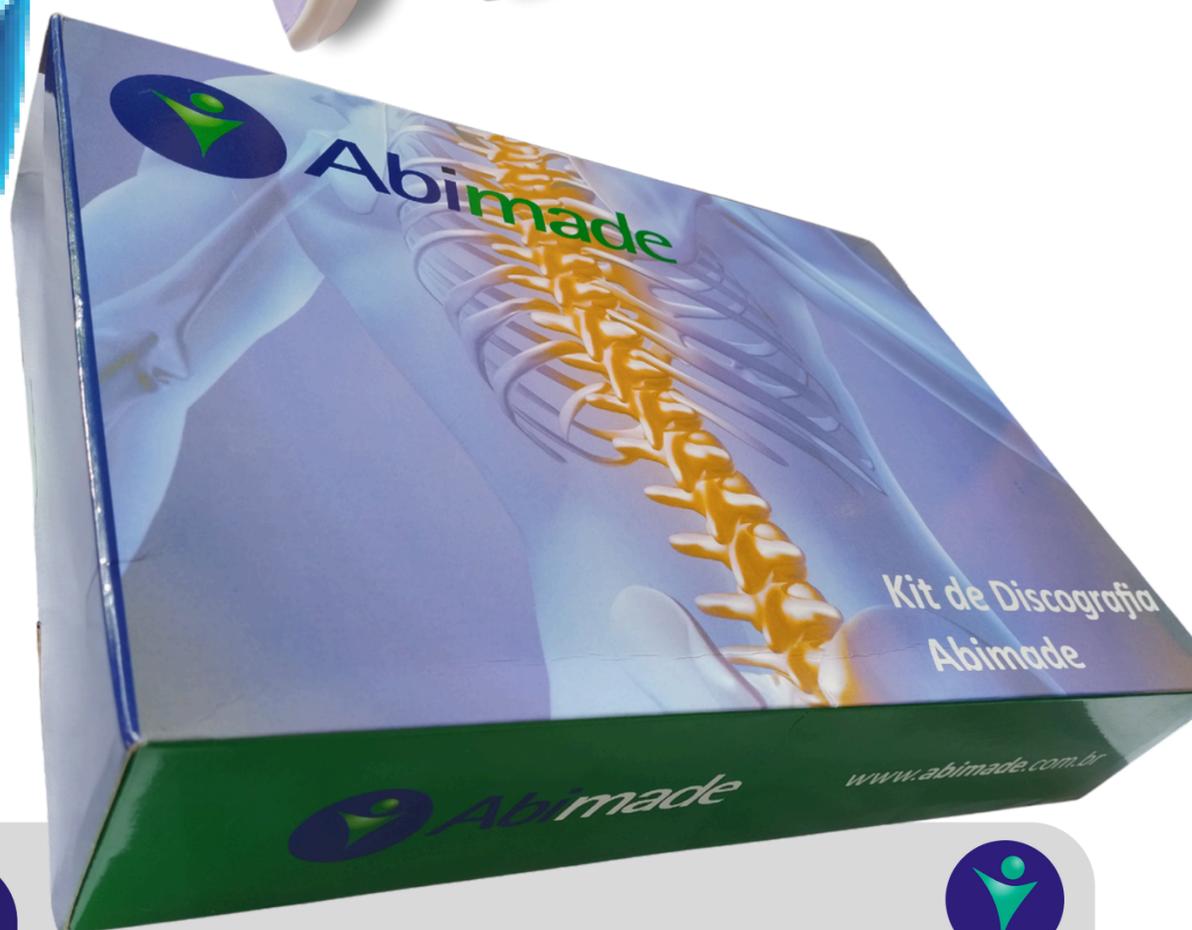

## INFORMAÇÕES

O KIT DE DISCOGRAFIA - ABIMADE é usado em procedimentos de, assim chamada, discografia provocativa, que visam à localização precisa, eficaz, de discopatogênias causadoras de dores.

Assim, determinar, com alta precisão, qual o disco intervertebral doente ou diretamente afetado.

### Conteúdo do Kit:

1 Cânula Guia  
1 Cânula Insufladora  
1 Seringa Insufladora

Solução para detecção de danos invertebrais.


Registro: 80525329012

\*Instruções de uso em nosso site\*



[www.abimade.com.br](http://www.abimade.com.br)

# Kit Face Pain Abimade

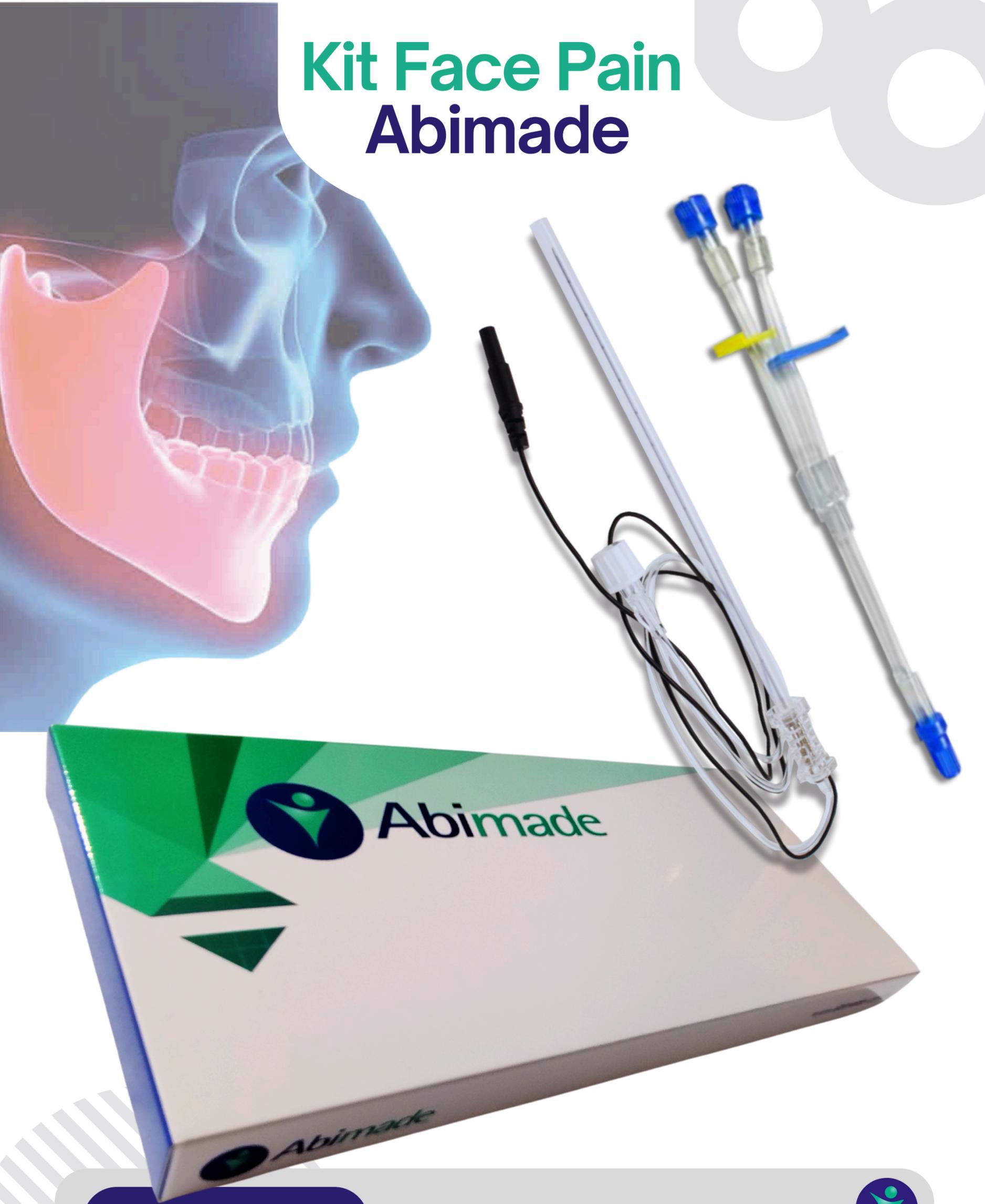

## INFORMAÇÕES



O KIT FACEPAIN é utilizado para aplicação de anestésicos em nervos periféricos. O mecanismo de ação é anestésicar o nervo, com objetivo de redução ou eliminação de dor. Com uma descarga elétrica de mínima corrente estimula o tecido vizinho, permitindo, através da reação deste certificar-se do correto posicionamento da cânula.

A cânula do KIT FACE PAIN, bloqueio medicamentoso de nervos periféricos. Proporciona anestesia e analgesia locais em procedimentos cirúrgicos envolvendo face do paciente.

È guiada através de monitoramento por ultrassom, além se ser provida de condutor para estimulação elétrica.

O diferencial desse produto é a possibilidade de se realizar o procedimento utilizando com uma ou duas cânulas simultaneamente em locais diferentes ou em momentos distintos (dentro do mesmo procedimento), além de que a cânula possui a estimulação elétrica para verificação do posicionamento.

As cânulas são uteis para técnicas de bloqueio nervoso em procedimento de dor aguda e crônica.

Registro: 80525329016

\*Instruções de uso em nosso site\*



[www.abimade.com.br](http://www.abimade.com.br)

# Guia de Biópsia Endocavitária Abimade



## INFORMAÇÕES



Guia para Transdutor Philips/Siemens/Siemens-Toshiba são para montagem em transdutores de ultrassonografia endocavitária que objetivam auxiliar a coleta de material biológico com agulha, guiando-a pelo orifício da Guia durante o procedimento de biópsia. As Guias são projetadas para guiar agulhas com calibre de 18G (diâmetro 1,2mm) à 16G (diâmetro 1,65 mm).

As Guias de Biópsia Endocavitárias Abimade, uma vez montadas (encaixadas) no Transdutor Ultrassônico apropriado, guiam as agulhas de biópsia durante o procedimento de retirada de material biológico da Próstata, via anal/retal, ou retirada de material do órgão reprodutor feminino via endovaginal.

### DISPONÍVEIS NAS MARCAS:

Ultrassom Philips:  
Transdutor: C9-4ec  
Transdutor: Bp10-5ec

Ultrassom Siemens:  
Transdutor: EC94-X300

Ultrassom Siemens/Toshiba:  
Transdutor: PVM-651VT  
Transdutor: PVT-661VT  
Transdutor: PVN-661VT

Registro: 8052532008

\*Instruções de uso em nosso site\*




[www.abimade.com.br](http://www.abimade.com.br)

# Cânula para Endoscopia Endocan Abimade



**\*Detalhes da Cânula\***

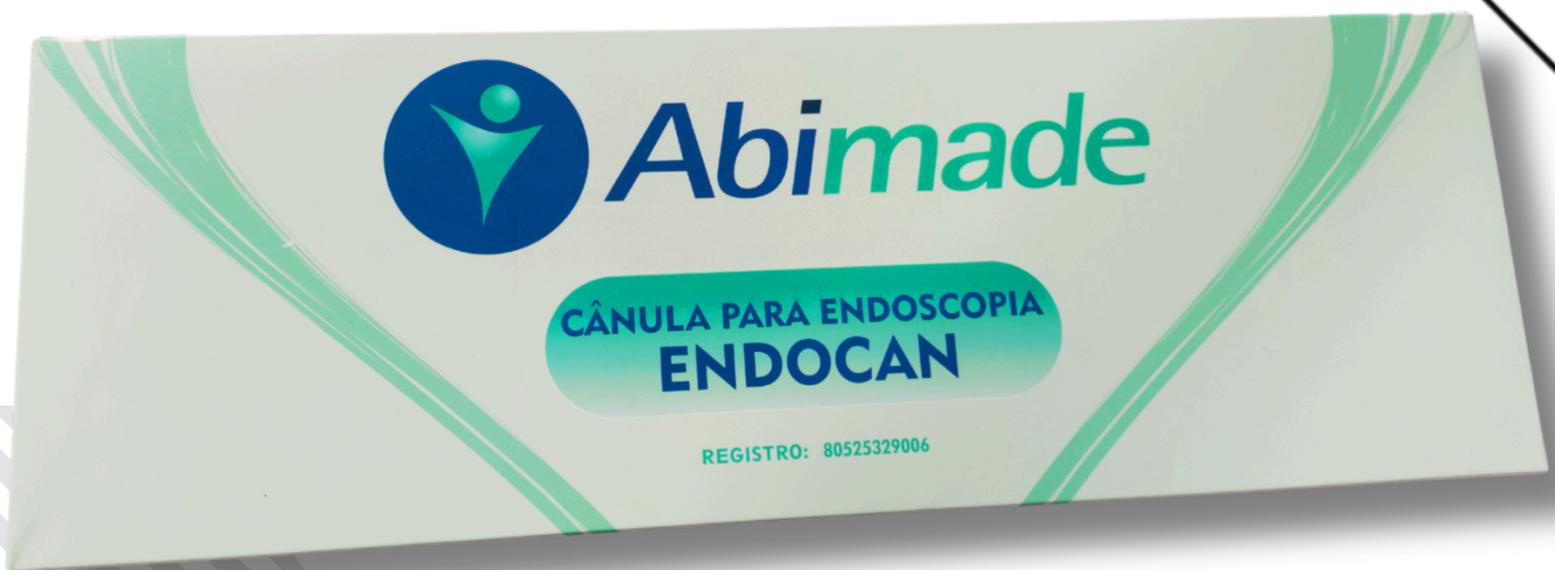

## INFORMAÇÕES



A Endocan é indicada para realizar procedimentos de bloqueio dos nervos periféricos através da injeção de soluções anestésicas/medicamentos. O Bloqueio consiste em interromper impulsos sensoriais da região da coluna lombar, diminuindo ou até eliminando por completo a dor no local exato das articulações da coluna vertebral, da raiz nervosa e de quaisquer ossos articulados. A Cânula Endocan vem revolucionar o tratamento de dor, sendo a primeira Cânula que não necessita de Raio-X para a localização do local a ser tratado, sendo assim evitado o contato a radiação excessiva do Paciente e do Cirurgião.

REGISTRO: 80525329006

**\*Instruções de uso em nosso site\***



[www.abimade.com.br](http://www.abimade.com.br)

# Fixadores Externos Abifix



## INFORMAÇÕES



Os Fixadores Externos Abifix -Abimade e seus elementos (plataforma, conectores, eixos roscados, parafusos, e demais componentes) formam uma estrutura metálica externa, a qual é conectada ao tecido ósseo através de Pinos de Schanz ou Fios Lisos (OBJETOS À SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE). Essa estrutura metálica externa tem como função transferir a carga aplicada ao osso afetado para a estrutura estática do aparelho, até que o tecido ósseo se regenere. O Fixador Externo Abimade é portanto um produto médico de correção, estabilização, alinhamento e fixação óssea temporária, até que o osso fraturado obtenha a completa regeneração.

A Indicação de aplicação dos Fixadores -Abimade é para serem utilizados em casos de osteosíntese, com a finalidade principal de alinhar, reduzir, corrigir, estabilizar e fixar temporariamente variados tipos de fraturas em ossos de membros superiores e inferiores.

Os modelos de Fixador Externo Abimade podem ser utilizados nos casos de fraturas simples, fraturas expostas, fraturas patológicas, osteotomias corretivas, deformidades ósseas, pseudoartroses, artrodeses, não união óssea, revisões cirúrgicas devido sequelas de tratamentos anteriores mal sucedidos, e casos de traumatologia que comportem a utilização de um dispositivo de fixação externa.

REGISTRO: :80525320017

**\*Instruções de uso em nosso site\***



[www.abimade.com.br](http://www.abimade.com.br)

# Atendimento

Fale conosco



**CARLA**

**+55 11 91413-4555**



Atendimento Geral

**+55 11 4622 7555**



carla.amaral@abimade.com.br



@abimadeprodutosmedicos



abimadeprodutosmedicos



abimade-produtos-medicos



www.abimade.com.br



## Certificação:



**Empresa Certificada RDC nº 16**  
**Boas práticas de Fabricação -**  
**Agência Nacional de Vigilância Sanitária**



**Rua Avenças 74**  
**Recanto Sombra do Ipê**  
**Santana de Parnaíba - SP**  
**CEP: 06513-212**

# Obrigado!

Agradecemos sinceramente sua atenção e estamos aqui para oferecer nossa ajuda com soluções confiáveis e altamente respeitadas no mercado.

Estamos à disposição para apoiá-lo da melhor forma possível.



**Abimade**

Compromisso com a qualidade, foco na solução.

 [www.abimade.com.br](http://www.abimade.com.br)